


Инструкция для: Марихуана / Гашиш (НК-3000) Вещество

Подготовка Теста	1	Извлеките пробоотборник из Тестового Модуля.		2	Возьмите пробы подозреваемой субстанции.	
					Растительное вещество	Гашиш
		Коснитесь клейким наконечником тестируемого образца. Убедитесь, что наконечник полностью покрыт.			Плотно прижмите пробоотборник к веществу и круговыми движениями вкрутите внутрь до тех пор, пока наконечник полностью не покроется веществом.	
Подготовка Теста	3	Вставьте Пробник в Тестовый Модуль. Плотно прижмите.		Определение	4	Большим и указательным пальцами сожмите Камеру 1 до разрыва капсулы.
		 НЕ переходите к след. шагу до того как Пробник полностью не станет на место. Звук щелчка покажет, что тест закрыт.				5
						
Определение	6	Большим и указательным пальцами сожмите Камеру 2 до разрыва капсулы.		7	Хорошо потрясите тестовый модуль в течение 5-10 секунд.	
					Подождите 3 минуты, чтобы цвет полностью проявился.	
Определение Результата			Если Сине-Фиолетовый цвет появился, то приступайте к Шагу 8.			
			Если не появился сине-фиолетовый цвет, то ни Марихуаны, ни Гашиша в проверяемом образце не присутствует. Приступите к Утилизации.			
Подтверждение	8	Большим и указательным пальцами сожмите Камеру 3 до разрыва капсулы.		9	Энергично потрясите тестовый модуль в течение 20 секунд.	
					Удерживайте тестовый модуль в вертикальном положении до видимого разделения цветовых уровней. Это может занять до 2 минут.	
Результат Подтверждения			Появление сине-фиолетового цвета в нижней части жидкости уверенно указывает на присутствие в образце Марихуаны или Гашиша.			
	* цвет может стать темнее со временем.		 Если нижний слой жидкости не стал сине-фиолетовым, то ни Марихуана, ни Гашиш в проверяемом образце не присутствуют.			
Утилизация		Тестовый Модуль может быть безопасно утилизирован.				

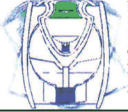

В качестве меры предосторожности, перчатки и защитные очки должны быть одеты при обработке веществ и использовании тестовых модулей. Не протыкайте какую-либо часть тестового блока. Не вынимайте тестер после блокировки в устройстве. В случае утечки, немедленно промойте пораженный участок водой. Хранить в недоступном для детей месте.

99% точности теста обеспечивается при правильном использовании.

Все результаты предположительные. При необходимости дальнейшего подтверждения, специализированная лаборатория может обеспечить дополнительную идентификацию с использованием анализа газохроматографии / масспектрометрии.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число